

	PROCESO GESTIÓN DE CONTROL ANALITICO	Código: I-GCA-03
	RECOLECCIÓN DE MUESTRA	Versión: 05
		Página 1 de 16
Revisó: Coordinación de gestión de clientes y alianzas estratégicas	Aprobó: Analista de calidad	Fecha de aprobación: 2026-03-18

INSTRUCTIVO RECOLECCIÓN DE MUESTRA

1. OBJETIVO.

Describir las instrucciones requeridas para la recolección de muestras destinadas para ensayos microbiológicos y /o fisicoquímicos.

2. ALCANCE.

Aplica para la recolección de muestras destinadas para ensayos microbiológicos y fisicoquímicos, de la industria de alimentos incluyendo áreas estériles, aguas y superficies, entre otras.

3. CONDICIONES DE SEGURIDAD.

- El personal responsable de la actividad de recolección de muestras tendrá que hacer uso de los implementos de bioseguridad como gorro, tapabocas, guantes estériles, bata u overol totalmente cerrado.
- Antes de iniciar el muestreo el profesional se deberá retirar cualquier tipo de joyas y accesorios.
- Recordar que el uso de maquillaje no está permitido.
- Indispensable lavar las manos con jabón líquido desinfectante, agua potable y secar con toallas desechables, antes de realizar la recolección de muestra.

Tener en cuenta:

- Conservar el material en condiciones de refrigeración hasta el momento de su uso.
- Contar con suficiente material estéril en buen estado e instrumentos para la recolección como cucharas, tijeras, cuchillos o tenedores estériles
- La muestra debe cumplir con la cantidad mínima requerida de acuerdo con la siguiente información:

Tabla 1. Cantidad mínima requerida de muestra

Tipo de muestra	Característica	Microbiología	Fisicoquímica
Alimentos	Muestra sólida	200 g	300 g
	Muestra líquida	200 mL	300 mL
Cosméticos	Muestra sólida	100 g	100 g
	Muestra líquida	100 mL	100 mL
Agua potable / Agua piscina / Agua superficial	Básico	500 mL	500 mL
	Patógenos	10000 mL / 10L	1000 mL

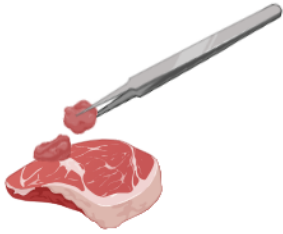
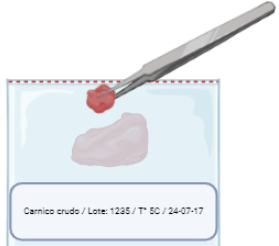
COPIA CONTROLADA

CONFIDENCIAL – Este documento es de uso exclusivo de INOQUALAB S.A.S, por lo que, se encuentra prohibido su divulgación por cualquier medio sin autorización expresa y escrita.

	PROCESO GESTIÓN DE CONTROL ANALITICO	Código: I-GCA-03
	RECOLECCIÓN DE MUESTRA	Versión: 05
		Página 2 de 16
Revisó: Coordinación de gestión de clientes y alianzas estratégicas	Aprobó: Analista de calidad	Fecha de aprobación: 2026-03-18

Esterilidad comercial	Muestra solida	4 unidades	NA
	Muestra liquida	4 unidades	NA

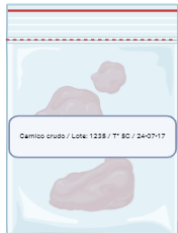
4. INSTRUCTIVO

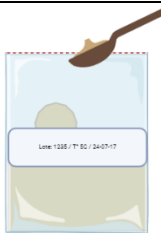
ALIMENTOS SÓLIDOS		
IMPLEMENTOS / MATERIALES	PASOS A PASO	DESCRIPCION GRAFICA
Equipo de protección personal: - Gorro - Tapabocas - Guantes estériles - Bata Insumos: - Bolsas Ziploc con cierre hermético - Utensilios estériles (cucharas, pinzas, cuchillos, etc.) - Marcador permanente Para tener en cuenta: Lavar las manos con jabón líquido desinfectante, agua potable y secar con toallas desechables. La muestra debe cumplir con la cantidad mínima requerida:	Rotular la bolsa estéril donde se recolectará la muestra con la información de: (Nombre del producto, Cantidad (gramos), Lote, Fecha de producción, Fecha de vencimiento, Temperatura, Fecha de recolección)	
	Alistar el material correspondiente para la recolección del alimento	
	Recolectar la muestra con ayuda del utensilio estéril, de forma que sea lo más representativa posible y lleve todos los ingredientes que lo componen (En el caso de sopas, ensaladas u otros alimentos que contengan más de un ingrediente).	
	Depositar la muestra hasta llenar una tercera parte (aproximadamente) de la bolsa estéril, evitando tocar la superficie de contacto externa.	

COPIA CONTROLADA

CONFIDENCIAL – Este documento es de uso exclusivo de INOQUALAB S.A.S, por lo que, se encuentra prohibido su divulgación por cualquier medio sin autorización expresa y escrita.

	PROCESO GESTIÓN DE CONTROL ANALITICO	Código: I-GCA-03
	RECOLECCIÓN DE MUESTRA	Versión: 05
		Página 3 de 16
Revisó: Coordinación de gestión de clientes y alianzas estratégicas	Aprobó: Analista de calidad	Fecha de aprobación: 2026-03-18

Para análisis microbiológicos y fisicoquímicos 200 g	Eliminar el aire contenido en el empaque, proceder a cerrar herméticamente, y, por último, verificar que no existen fugas en el empaque, que permitan derrames o contaminación de la muestra.	
---	---	---

ALIMENTOS LIQUIDOS		
IMPLEMENTOS / MATERIALES	PASOS A PASO	DESCRIPCION GRAFICA
Equipo de protección personal: - Gorro - Tapabocas - Guantes estériles - Bata Insumos: - Bolsas Whirl-pak - Utensilios estériles (cucharas, pinzas, cuchillos, etc.) - Marcador permanente Para tener en cuenta: Lavar las manos con jabón líquido desinfectante, agua potable y secar con toallas desechables. La muestra debe cumplir con la cantidad mínima requerida:	Rotular la bolsa estéril donde se recolectará la muestra con la información de: (Nombre del producto, Cantidad (mililitros), Lote, Fecha de producción, Fecha de vencimiento, Temperatura, Fecha de recolección)	
	Alistar el material correspondiente para la recolección del alimento	
	Retirar el sello de seguridad de la bolsa Whirl-pak	
	Recolectar la muestra con ayuda del utensilio estéril, de forma que sea lo más representativa posible y lleve todos los ingredientes que lo componen (En el caso de sopas, ensaladas u otros alimentos que contengan más de un ingrediente).	
	Depositar la muestra hasta llenar una tercera parte (aproximadamente) de la bolsa estéril, evitando tocar la superficie de contacto externa.	

COPIA CONTROLADA

CONFIDENCIAL – Este documento es de uso exclusivo de INOQUALAB S.A.S, por lo que, se encuentra prohibido su divulgación por cualquier medio sin autorización expresa y escrita.

	PROCESO GESTIÓN DE CONTROL ANALITICO	Código: I-GCA-03
	RECOLECCIÓN DE MUESTRA	Versión: 05
		Página 4 de 16
Revisó: Coordinación de gestión de clientes y alianzas estratégicas	Aprobó: Analista de calidad	Fecha de aprobación: 2026-03-18

Para análisis microbiológicos y fisicoquímicos 200 mL	Eliminar el aire contenido en el empaque, proceder a cerrar herméticamente, y, por último, verificar que no existen fugas en el empaque, que permitan derrames o contaminación de la muestra.	
--	---	---

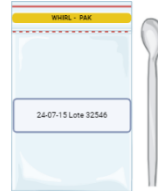
COSMÉTICOS SÓLIDOS		
IMPLEMENTOS / MATERIALES	PASOS A PASO	DESCRIPCION GRAFICA
Equipo de protección personal: - Gorro - Tapabocas - Guantes estériles - Bata Insumos: - Bolsas Ziploc con cierre hermético - Utensilios estériles (cucharas, pinzas, cuchillos, etc.) - Marcador permanente Para tener en cuenta: Lavar las manos con jabón líquido desinfectante, agua	Rotular la bolsa estéril donde se recolectará la muestra con la información de: (Nombre del producto, Cantidad (gramos), Lote, Fecha de producción, Fecha de vencimiento, Temperatura, Fecha de recolección)	
	Alistar el material correspondiente para la recolección del alimento	
	Recolectar la muestra con ayuda del utensilio estéril, de forma que sea lo más representativa posible y lleve todos los ingredientes que lo componen.	

COPIA CONTROLADA

CONFIDENCIAL – Este documento es de uso exclusivo de INOQUALAB S.A.S, por lo que, se encuentra prohibido su divulgación por cualquier medio sin autorización expresa y escrita.

	PROCESO GESTIÓN DE CONTROL ANALITICO	Código: I-GCA-03
	RECOLECCIÓN DE MUESTRA	Versión: 05
		Página 5 de 16
Revisó: Coordinación de gestión de clientes y alianzas estratégicas	Aprobó: Analista de calidad	Fecha de aprobación: 2026-03-18

potable y secar con toallas desechables. La muestra debe cumplir con la cantidad mínima requerida: Para análisis microbiológicos y fisicoquímicos 100 g	Depositar la muestra hasta llenar una tercera parte (aproximadamente) de la bolsa estéril, evitando tocar la superficie de contacto externa.	
	Eliminar el aire contenido en el empaque, proceder a cerrar herméticamente, y, por último, verificar que no existen fugas en el empaque, que permitan derrames o contaminación de la muestra.	

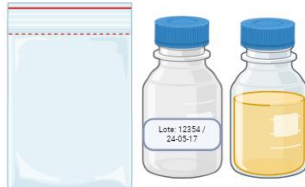
COSMÉTICOS LIQUIDOS		
IMPLEMENTOS / MATERIALES	PASOS A PASO	DESCRIPCION GRAFICA
Equipo de protección personal: - Gorro - Tapabocas - Guantes estériles - Bata Insumos: - Bolsas Whirl-pak - Utensilios estériles (cucharas, pinzas, cuchillos, etc.) - Marcador permanente	Rotular la bolsa estéril donde se recolectará la muestra con la información de: (Nombre del producto, Cantidad (mililitros), Lote, Fecha de producción, Fecha de vencimiento, Temperatura, Fecha de recolección)	
	Alistar el material correspondiente para la recolección del alimento	
	Retirar el sello de seguridad de la bolsa Whirl-pak	

COPIA CONTROLADA

CONFIDENCIAL – Este documento es de uso exclusivo de INOQUALAB S.A.S, por lo que, se encuentra prohibido su divulgación por cualquier medio sin autorización expresa y escrita.

	PROCESO GESTIÓN DE CONTROL ANALITICO	Código: I-GCA-03
	RECOLECCIÓN DE MUESTRA	Versión: 05
		Página 6 de 16
Revisó: Coordinación de gestión de clientes y alianzas estratégicas	Aprobó: Analista de calidad	Fecha de aprobación: 2026-03-18

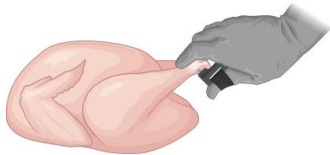
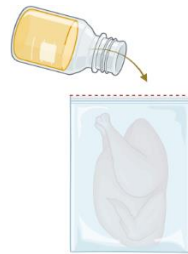
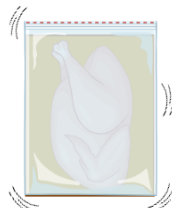
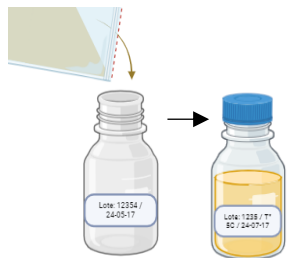
Para tener en cuenta: Lavar las manos con jabón líquido desinfectante, agua potable y secar con toallas desechables. La muestra debe cumplir con la cantidad mínima requerida: Para análisis microbiológicos y fisicoquímicos 100 mL	Recolectar la muestra con ayuda del utensilio estéril, de forma que sea lo más representativa posible y lleve todos los ingredientes que lo componen.	
	Depositar la muestra hasta llenar una tercera parte (aproximadamente) de la bolsa estéril, evitando tocar la superficie de contacto externa.	
	Eliminar el aire contenido en el empaque, proceder a cerrar herméticamente, y, por último, verificar que no existen fugas en el empaque, que permitan derrames o contaminación de la muestra.	

CANALES		
IMPLEMENTOS / MATERIALES	PASOS A PASO CANAL DE POLLO	DESCRIPCION GRAFICA
Equipo de protección personal: - Gorro - Tapabocas - Guantes estériles - Bata Insumos canal de pollo:	Rotular el frasco 2 donde se recolectará la muestra con la información de: (Nombre del producto, Lote, Fecha de sacrificio, Temperatura, Fecha de recolección)	
	Alistar el material correspondiente para la recolección de la canal de pollo	

COPIA CONTROLADA

CONFIDENCIAL – Este documento es de uso exclusivo de INOQUALAB S.A.S, por lo que, se encuentra prohibido su divulgación por cualquier medio sin autorización expresa y escrita.

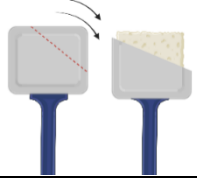
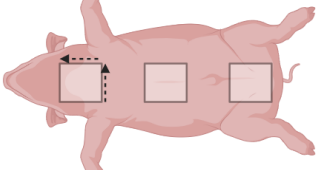
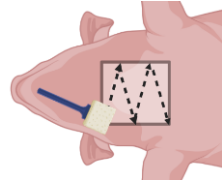
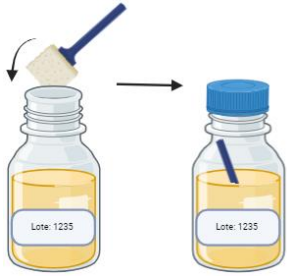
	PROCESO GESTIÓN DE CONTROL ANALITICO	Código: I-GCA-03
	RECOLECCIÓN DE MUESTRA	Versión: 05
		Página 7 de 16
Revisó: Coordinación de gestión de clientes y alianzas estratégicas	Aprobó: Analista de calidad	Fecha de aprobación: 2026-03-18

- Frasco 1 con agua peptona - Frasco 2 estéril - Bolsa ziploc - Marcador permanente Para tener en cuenta: Lavar las manos con jabón líquido desinfectante, agua potable y secar con toallas desechables.	Recolectar el pollo entero de la salida del chiller con ayuda de un guante estéril	
	Depositar la muestra dentro de la bolsa estéril, evitando tocar la superficie de contacto externa.	
	Abrir el frasco 1 que contiene el enjuague y verter el medio líquido en la bolsa que contiene la muestra.	
	Agitar el contenido de la bolsa hasta que la muestra quede completamente cubierta	
	Retirar el pollo entero con ayuda del guante estéril.	
	Verter el medio líquido cuidadosamente en el frasco 2 estéril y cerrar. Y, por último, verificar que no existen fugas en el empaque, que permitan derrames o contaminación de la muestra.	

COPIA CONTROLADA

CONFIDENCIAL – Este documento es de uso exclusivo de INOQUALAB S.A.S, por lo que, se encuentra prohibido su divulgación por cualquier medio sin autorización expresa y escrita.

	PROCESO GESTIÓN DE CONTROL ANALITICO		Código: I-GCA-03
	RECOLECCIÓN DE MUESTRA		Versión: 05
			Página 8 de 16
Revisó: Coordinación de gestión de clientes y alianzas estratégicas	Aprobó: Analista de calidad	Fecha de aprobación: 2026-03-18	

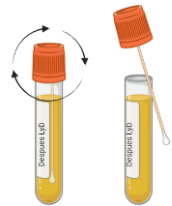
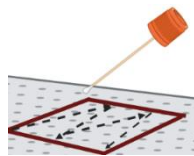
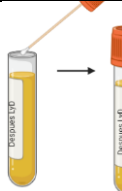
IMPLEMENTOS / MATERIALES	PASOS A PASO CANAL DE BOVINO O PORCINO	DESCRIPCION GRAFICA
Equipo de protección personal: • Gorro • Tapabocas • Guantes estériles • Bata Insumos canal de bovino o porcino: • Frasco 1 con agua peptona • Torunda estéril • Marcador permanente Para tener en cuenta: Lavar las manos con jabón líquido desinfectante, agua potable y secar con toallas desechables.	Rotular el frasco donde se recolectará la muestra con la información de: (Nombre del producto, Lote, Fecha de sacrificio, Temperatura, Fecha de recolección)	
	Aflojar la tapa del frasco que contiene el enjuague cuidadosamente, evitando derramar el medio líquido y dejar la tapa sobrepuesta.	
	Abrir la torunda, impidiendo que la gasa toque la superficie del manipulador o contacto externo	
	Escoger tres áreas de 10x10 cm2 para recolectar una muestra representativa. Se sugiere (Flanco, pecho y cuarto trasero) respectivamente	
	Realizar con la torunda los frotis en forma de zigzag vertical y horizontalmente.	
	Introducir la torunda en el medio líquido y cerrar el frasco. Y, por último, verificar que no existen fugas en el empaque, que permitan derrames o contaminación de la muestra.	

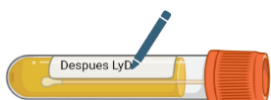
SUPERFICIE

COPIA CONTROLADA

CONFIDENCIAL – Este documento es de uso exclusivo de INOQUALAB S.A.S, por lo que, se encuentra prohibido su divulgación por cualquier medio sin autorización expresa y escrita.

	PROCESO GESTIÓN DE CONTROL ANALITICO		Código: I-GCA-03
	RECOLECCIÓN DE MUESTRA		Versión: 05
			Página 9 de 16
Revisó: Coordinación de gestión de clientes y alianzas estratégicas	Aprobó: Analista de calidad	Fecha de aprobación: 2026-03-18	

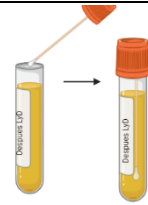
IMPLEMENTOS / MATERIALES	PASOS A PASO	DESCRIPCION GRAFICA
Equipo de protección personal: • Gorro • Tapabocas • Guantes estériles • Bata Insumos: • Letheen Broth • Marcador permanente Para tener en cuenta: Lavar las manos con jabón líquido desinfectante, agua potable y secar con toallas desechables.	Rotular el tubo Letheen Broth donde se recolectará la muestra con la información de: (Nombre, indicando el estado del proceso (Antes LyD, En proceso o Después LyD), Tipo de superficie, Área, Temperatura, Fecha de recolección)	
	Escoger un área de 10x10 cm2 para recolectar la muestra.	
	Abrir el tubo Letheen Broth cuidadosamente, evitando derramar el medio líquido e impedir que el hisopo toque la superficie de contacto externa.	
	Realizar con el hisopo un frotis en forma de zigzag vertical y horizontalmente.	
	Introducir el hisopo nuevamente en el medio líquido y cerrar el tubo. Por último, verificar que no existen fugas en el empaque, que permitan derrames o contaminación de la muestra.	

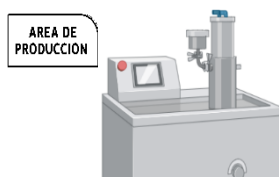
MANIPULADOR		
IMPLEMENTOS / MATERIALES	PASOS A PASO	DESCRIPCION GRAFICA
Equipo de protección personal: • Gorro • Tapabocas	Rotular el tubo Letheen Broth donde se recolectará la muestra con la información de: (Nombre, indicando el estado del proceso (Antes LyD, En proceso o Después LyD), Área, Fecha de recolección)	

COPIA CONTROLADA

CONFIDENCIAL – Este documento es de uso exclusivo de INOQUALAB S.A.S, por lo que, se encuentra prohibido su divulgación por cualquier medio sin autorización expresa y escrita.

	PROCESO GESTIÓN DE CONTROL ANALITICO		Código: I-GCA-03
	RECOLECCIÓN DE MUESTRA		Versión: 05
			Página 10 de 16
Revisó: Coordinación de gestión de clientes y alianzas estratégicas	Aprobó: Analista de calidad	Fecha de aprobación: 2026-03-18	

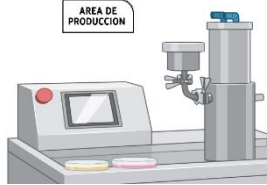
- Guantes estériles - Bata Insumos: - Letheen Broth - Marcador permanente Para tener en cuenta: Lavar las manos con jabón líquido desinfectante, agua potable y secar con toallas desechables.	Escoger el operario al cual se le realizara el frotis. Abrir el tubo Letheen Broth cuidadosamente, evitando derramar el medio líquido e impedir que el hisopo toque la superficie de contacto externa.	
	Realizar con el hisopo un frotis por la superficie de las manos o guantes del operario, cubriendo la totalidad de la palma, el espacio entre los dedos y por debajo y alrededor de las uñas.	
	Introducir el hisopo nuevamente en el medio líquido y cerrar el tubo. Por último, verificar que no existen fugas en el empaque, que permitan derrames o contaminación de la muestra.	

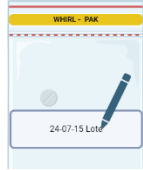
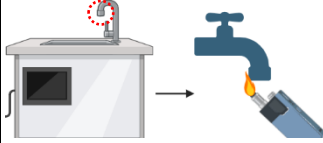
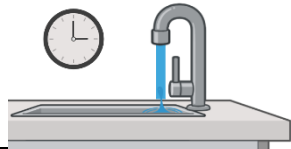
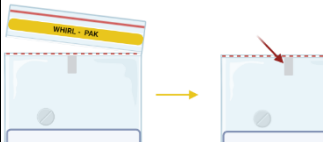
AMBIENTE		
IMPLEMENTOS / MATERIALES	PASOS A PASO	DESCRIPCION GRAFICA
Equipo de protección personal: - Gorro - Tapabocas - Guantes estériles - Bata	Rotular la bolsa con sello hermético que contiene el material con la información de: (Nombre, indicando el estado del proceso (Antes LyD, En proceso o Después LyD), Área, Temperatura, Fecha de recolección)	
	Identificar el área y el sitio donde se realizará la recolección de muestra. Abrir y sacar las dos cajas Petri de la bolsa ziploc.	

COPIA CONTROLADA

CONFIDENCIAL – Este documento es de uso exclusivo de INOQUALAB S.A.S, por lo que, se encuentra prohibido su divulgación por cualquier medio sin autorización expresa y escrita.

	PROCESO GESTIÓN DE CONTROL ANALITICO	Código: I-GCA-03
	RECOLECCIÓN DE MUESTRA	Versión: 05
		Página 11 de 16
Revisó: Coordinación de gestión de clientes y alianzas estratégicas	Aprobó: Analista de calidad	Fecha de aprobación: 2026-03-18

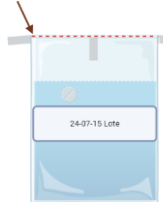
Insumos: - Caja Petri con agar Plate count (Aerobios mesófilos) - Caja Petri con agar Rosa bengala (Mohos y levaduras) - Bolsa ziploc	Retirar la tapa de las dos cajas Petri. Dejar expuesta las dos cajas Petri una al lado de la otra por 15 minutos en la zona seleccionada, de preferencia en la mitad del área que se quiera abarcar.	
	Al pasar el tiempo, proceder a tapar las dos cajas Petri y guardar en la bolsa ziploc.	
	Eliminar el aire contenido y cerrar herméticamente. Por último, verificar que no existen fisuras en el empaque, que permitan contaminación de la muestra.	

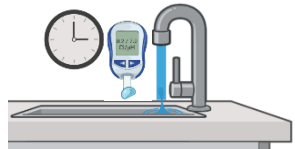
AGUA POTABLE (MICROBIOLOGIA)		
IMPLEMENTOS / MATERIALES	PASOS A PASO	DESCRIPCION GRAFICA
Equipo de protección personal: - Gorro - Tapabocas - Guantes estériles - Bata Insumos: - Bolsa Whirl-pak con pastilla de Tiosulfato - Marcador permanente	Rotular la bolsa Whirl-pak que contiene la pastilla de Tiosulfato con la información de: (Nombre, Área, Temperatura y Fecha de recolección)	
	Escoger el punto de salida de agua que requiere realizar la recolección. Desinfectar la boquilla del grifo con alcohol y flamear con un mechero.	
	Abrir la llave de paso y dejar circular el agua por un minuto aproximadamente.	
	Retirar el sello de seguridad de la bolsa Whirl-pak con la pastilla de tiosulfato y abrir la bolsa estéril con ayuda de las pestañas	

COPIA CONTROLADA

CONFIDENCIAL – Este documento es de uso exclusivo de INOQUALAB S.A.S, por lo que, se encuentra prohibido su divulgación por cualquier medio sin autorización expresa y escrita.

	PROCESO GESTIÓN DE CONTROL ANALITICO	Código: I-GCA-03
	RECOLECCIÓN DE MUESTRA	Versión: 05
		Página 12 de 16
Revisó: Coordinación de gestión de clientes y alianzas estratégicas	Aprobó: Analista de calidad	Fecha de aprobación: 2026-03-18

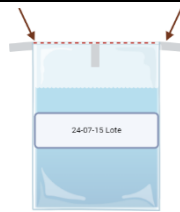
La muestra debe cumplir con la cantidad mínima requerida: Para análisis microbiológicos básicos 500 mL y patógenos 1000 mL	Colocar la bolsa bajo la llave de agua hasta llenar la tercera parte	
	Halar de los extremos, enrollar, doblar y enroscar las pestañas y, por último, verificar que no existen fugas en el empaque, que permitan derrames o contaminación de la muestra.	

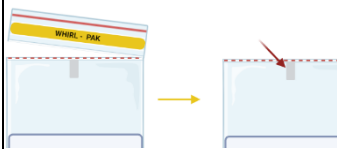
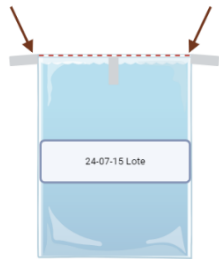
AGUA POTABLE (FISICOQUÍMICA)		
IMPLEMENTOS / MATERIALES	PASOS A PASO	DESCRIPCION GRAFICA
Equipo de protección personal: - Gorro - Tapabocas - Guantes estériles - Bata Insumos: - Bolsa Whirl-pak - Marcador permanente - Equipo de Cloro y pH	Rotular la bolsa Whirl-pak con la información de: (Nombre, Área, Temperatura y Fecha de recolección, Cantidad de Cloro y pH)	
	Escoger el punto de salida de agua que requiere realizar la recolección. Desinfectar la boquilla del grifo con alcohol y flamear con un mechero.	
	Abrir la llave de paso y dejar circular el agua por un minuto aproximadamente, una vez cumplido el tiempo tomar los valores de Cloro y pH, los cuales se deben reportar al laboratorio	
	Retirar el sello de seguridad de la bolsa Whirl-pak y abrir la bolsa estéril con ayuda de pestañas	
	Colocar la bolsa bajo la llave de agua hasta llenar la tercera parte	

COPIA CONTROLADA

CONFIDENCIAL – Este documento es de uso exclusivo de INOQUALAB S.A.S, por lo que, se encuentra prohibido su divulgación por cualquier medio sin autorización expresa y escrita.

	PROCESO GESTIÓN DE CONTROL ANALITICO	Código: I-GCA-03
	RECOLECCIÓN DE MUESTRA	Versión: 05
		Página 13 de 16
Revisó: Coordinación de gestión de clientes y alianzas estratégicas	Aprobó: Analista de calidad	Fecha de aprobación: 2026-03-18

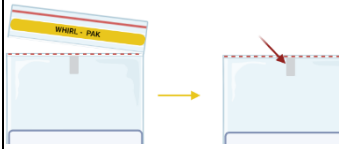
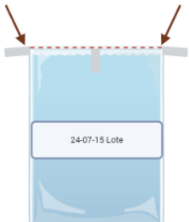
Para análisis fisicoquímicos 500 mL	Halar de los extremos, enrollar, doblar y enroscar las pestañas y, por último, verificar que no existen fugas en el empaque, que permitan derrames o contaminación de la muestra.	
--	---	---

AGUA PISCINA (MICROBIOLOGÍA)		
IMPLEMENTOS / MATERIALES	PASOS A PASO	DESCRIPCION GRAFICA
Equipo de protección personal: - Gorro - Tapabocas - Guantes estériles - Bata Insumos: - Bolsa Whirl-pak - Marcador permanente La muestra debe cumplir con la cantidad mínima requerida: - Para análisis microbiológicos básicos 500 mL	Rotular la bolsa Whirl-pak con la información de: (Nombre, Área, Temperatura y Fecha de recolección)	
	Retirar el sello de seguridad de la bolsa Whirl-pak y abrir la bolsa estéril con ayuda de pestañas	
	Sumergir la bolsa completamente, hacer un recorrido en forma de infinito	
	Halar de los extremos y doblar dentro de la piscina.	
	Posteriormente terminar de enrollar, doblar y enroscar las pestañas por fuera de la piscina, y, por último, verificar que no existen fugas en el empaque, que permitan derrames o contaminación de la muestra.	

COPIA CONTROLADA

CONFIDENCIAL – Este documento es de uso exclusivo de INOQUALAB S.A.S, por lo que, se encuentra prohibido su divulgación por cualquier medio sin autorización expresa y escrita.

	PROCESO GESTIÓN DE CONTROL ANALITICO	Código: I-GCA-03
	RECOLECCIÓN DE MUESTRA	Versión: 05
		Página 14 de 16
Revisó: Coordinación de gestión de clientes y alianzas estratégicas	Aprobó: Analista de calidad	Fecha de aprobación: 2026-03-18

AGUA PISCINA (FISICOQUÍMICA)		
IMPLEMENTOS / MATERIALES	PASOS A PASO	DESCRIPCION GRAFICA
Equipo de protección personal: • Gorro • Tapabocas • Guantes estériles • Bata Insumos: • Bolsa Whirl-pak • Marcador permanente • Equipo de Cloro y pH La muestra debe cumplir con la cantidad mínima requerida: Para análisis fisicoquímicos básicos 500 mL	Rotular la bolsa Whirl-pak con la información de: (Nombre, Área, Temperatura y Fecha de recolección, Cantidad de Cloro y pH)	
	Tomar los valores de Cloro y pH, los cuales se deben reportar al laboratorio	
	Retirar el sello de seguridad de la bolsa Whirl-pak y abrir la bolsa estéril con ayuda de pestañas	
	Sumergir la bolsa completamente, hacer un recorrido en forma de infinito	
	Halar de los extremos y doblar dentro de la piscina.	
	Posteriormente terminar de enrollar, doblar y enroscar las pestañas por fuera de la piscina, y, por último, verificar que no existen fugas en el empaque, que permitan derrames o contaminación de la muestra.	

5. RECOMENDACIONES

- Diligenciar con letra clara los datos requeridos en el formato "F-GCA-49 hoja de registro de remisión de muestras".
- NO CONGELAR el material de muestreo ni antes ni después de la recolección de muestra.

COPIA CONTROLADA

CONFIDENCIAL – Este documento es de uso exclusivo de INOQUALAB S.A.S, por lo que, se encuentra prohibido su divulgación por cualquier medio sin autorización expresa y escrita.

	PROCESO GESTIÓN DE CONTROL ANALITICO		Código: I-GCA-03
	RECOLECCIÓN DE MUESTRA		Versión: 05
			Página 15 de 16
Revisó: Coordinación de gestión de clientes y alianzas estratégicas	Aprobó: Analista de calidad	Fecha de aprobación: 2026-03-18	

- Los medios de cultivo contenidos en las cajas de Petri para muestreos ambientales se pueden conservar hasta 15 días a temperatura de refrigeración, siempre y cuando aún no hayan sido usados. NO se debe almacenar a temperatura ambiente ni de congelación.
- El tiempo entre la recolección de la muestra y la recepción en el laboratorio no debe exceder las 24 horas para ser analizadas inmediatamente.
- Las muestras recolectadas, se deben mantener en refrigeración y solo congelar las que lo requieran, así aseguramos que las muestras serán procesadas de forma adecuada y obtener resultados confiables.
- Transportar las muestras bajo condiciones de refrigeración (2-8°C) en neveras térmicas, que garanticen la cadena de frio hasta su entrega en el laboratorio.
- Horario de Recepción de Muestras: De lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 pm. Sábados de 7:00 a.m. a 11:30 a.m.
- El material suministrado para la recolección de muestras (tubos, frascos u otros) debe ser manipulado, almacenado y transportado adecuadamente por el cliente, garantizando su integridad. En caso de devolución en condiciones inadecuadas, deterioro o pérdida que impidan su uso para el análisis, dicho material será considerado no conforme y se procederá a su cobro según las políticas vigentes del laboratorio.

6. CONTROL DE CAMBIOS DEL PROCEDIMIENTO.

VERSION	DESCRIPCION DEL CAMBIO	FECHA	RESPONSABLE
1	Versión inicial del documento.	2016-10-20	N.E
2	Cambio en la codificación de las muestras N°5.1.9 Adición N° 5.2. Especificaciones para recolección de muestras método de enjuague para superficies de contacto.	2027-12-22	N.E
3	Se realizo una modificación en toda la parte estructural del documento, mejorando redacción, eliminando información de poca relevancia. Se modificaron las condiciones de seguridad y especificó para cada uno de los casos los materiales, equipos necesarios y volúmenes adecuados para su análisis. De igual forma se agregaron ilustraciones graficas para facilitar su comprensión y se sintetizo el paso a paso para cada una de las recolecciones de muestras.	2024-07-19	A. Vega
4	Se actualiza logo corporativo. Se agregó en tipo de muestra la matriz de cosméticos en la Tabla 1 y se agrega la cantidad mínima requerida de muestra; adicionalmente, se incluyó en el punto 4. Instructivo, el procedimiento para la recolección de muestras de cosméticos.	2026-01-13	A.Rodríguez

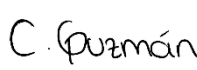
COPIA CONTROLADA

CONFIDENCIAL – Este documento es de uso exclusivo de INOQUALAB S.A.S, por lo que, se encuentra prohibido su divulgación por cualquier medio sin autorización expresa y escrita.

	PROCESO GESTIÓN DE CONTROL ANALITICO	Código: I-GCA-03
	RECOLECCIÓN DE MUESTRA	Versión: 05
		Página 16 de 16
Revisó: Coordinación de gestión de clientes y alianzas estratégicas	Aprobó: Analista de calidad	Fecha de aprobación: 2026-03-18

5	Se incluye recomendación relacionada con la manipulación, conservación y devolución del material de muestreo suministrado al cliente, estableciendo el cobro del material en caso de deterioro, pérdida o condiciones no aptas para su uso.	2026-03-18	L.Cáceres
---	---	------------	-----------

7. RESPONSABLES

	ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
NOMBRE:	Luisa Fernanda Cáceres R.	Nikoll Corredor	Cristina Guzmán
CARGO:	Analista de gestión de clientes y alianzas estratégicas	Coordinación de gestión de clientes y alianzas estratégicas	Analista de calidad
FIRMA:			
FECHA:	2026-03-18	2026-03-18	2026-03-18

COPIA CONTROLADA

CONFIDENCIAL – Este documento es de uso exclusivo de INOQUALAB S.A.S, por lo que, se encuentra prohibido su divulgación por cualquier medio sin autorización expresa y escrita.